




BM-100A

Transkütan Bilirubinmetre

Etkili, Kullanıcı Dostu, Akıllı

- 3,0 inç renkli dokunmatik ekran
- Büyük karakterler ölçüm değerini net ve hızlı bir şekilde gösterir
- Ekranda birden fazla ölçüm verisi görüntülenir
- Hastalar için veri yönetimi sağlamak amacıyla birden fazla hasta bilgisinin eş zamanlı olarak saklanması.

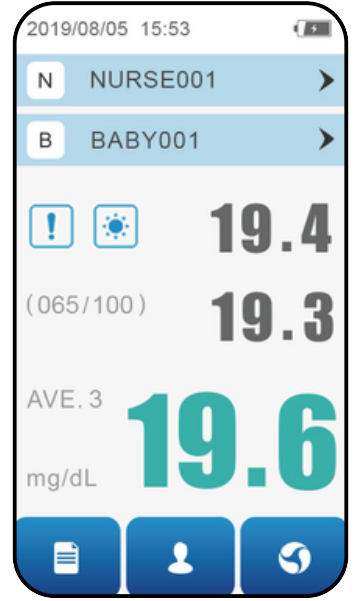

Uzun Ömürlü, Kullanıcı Dostu ve Dayanıklı.

- Şarj standı ile donatılmış, uzun ömürlü dahili şarj edilebilir pil,
- 2000 ölçüm kapasiteli batarya;
- Uzun ömürlü Xenon flaş lambası (ölçüm ≥ 150.000 kez);
- Entegre ışık kontrol fonksiyonuna sahip şarj standı, sarf malzemesi gerektirmez, kontrol maliyetinden tasarruf sağlar.

Doğru Ölçüm ve Hızlı Kontrol

- Tekrarlanan kalibrasyona gerek kalmadan birden fazla hastada sabit ölçüm;
- Ortalama ölçüm: Bu fonksiyon, sonuçların doğruluğunu sağlamak için ortalama ölçüm
- İki farklı ölçüm birimi arasında değişim: mg/dL, $\mu\text{mol/L}$.



Dahili Kontrol Paleti

Standart Konfigürasyon

Cihaz, Stand, Taşıma Çantası ve Güç Adaptöründen oluşur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihazın probunu yenidoğanın alnına veya göğüs kemiğine hafifçe bastırarak, birkaç saniye içinde transkutanöz bilirubin seviyelerini mg/dL veya $\mu\text{mol/L}$ cinsinden ölçer.

Kullanımı ve şarj standı ile taşınması kolaydır; yenidoğan bölümündeki sağlık profesyonelleri ve ebeler için son derece kullanışlı ve uygundur.

Özellikler	
Maksimum Ölçüm	0,0 ila 25,0 mg/dL veya 0 ila 425 $\mu\text{mol/L}$
Hassasiyet	$\pm 1,5$ mg/dL veya $\pm 25,5$ $\mu\text{mol/L}$
Tekrarlanabilirlik	< 3%
Ortalama Ölçüm	1 ila 5 ölçüm arasında ortalama değer ayarı
Ekran	3" Renli Dokunmatik Ekran
Parlaklık Seviyesi	5 Farklı Parlaklık Seviyesi
Ölçüm Birimi	mg/dL veya $\mu\text{mol/L}$
Standby	1 dk - 5 dk
Işık Kaynağı	Xenon Flash
Işık Kaynağı Ömrü	≥ 150.000 Ölçüm
Veri Kayıt	Hemşire ID, Hasta ID, 100 Ölçüm Geçmişi
Boyut	Cihaz; 60mm x41mmx175mm / Stand; 85mm x155mmx106mm
Ağırlık	Cihaz; $\leq 250\text{g}$ / Stand; $\leq 250\text{g}$
Batarya	7.4V = Lityum Batarya
Tıbbi Cihaz Güvenlik Sınıfı	Class-IIa
UDI	06920716304213
Sertifikasyon	CE0123 , ISO13485
Dahili Kontrol Paleti	0.0 - 1.5 / 18.5 - 21.5



• Alüminyum Taşıma Çantası Dahildir