

SeaMed

KN-2200I (HD)

SeaMed

Yazılım Fonksiyonları ve Özellikleri ( KN-2200/2200A/2200I/2200B ) :

- İngilizce, Türkçe, Çince, İspanyolca, Rusça, Vietnam ve diğerlerini içeren çoklu dil desteği
- Video kaydı, görüntüyü dondurma, düzenleme, resim alma, rapor çıktısı ve saklama özelliklerine sahip çok fonksiyonlu işletim yazılımı
- Özel yazılım paketi, görüntüyü büyültme küçültme, görüntü üzerinde işaretleme, bölgesel büyütme ve benzeri işlemler için kullanılabilir. Asetik asit reaksiyon için geriye sayma fonksiyonu ile, kolposkopi muayenesi ve operatif tedavide dinamik gözlem için gayet uygundur
- Çeşitli vaka veritabanı (175 çeşit), arzu edilen vaka görüntüleri eklenebilir, klinik kontrast için uygundur
- Standart durumlarda rapor düzenleme ve yazdırma için uygun hazır şablon; teşhis raporları ile RGB görüntü baskısının çeşitli biçimlerini destekler; doktor vaka raporu tasarlayabilir
- Vaka numarası, isim ve tarih yoluyla vaka arama; Elde edilen vakalara görüntü gösterimi, veri değiştirme, kaydetme, yeniden inceleme ve video oynatma
- Çok çeşitli görüntü verisi saklanır ve yedeği alınır
- Win7 ve Win8 işletim sistemlerini destekleyen, Tek tuşla yazılım kurulumu



Esnek kombinasyon

  
DENİZLER  
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com


CE 0123



KN-2200I (HD) Video Kolposkop

SeaMed

KN-2200I (HD)

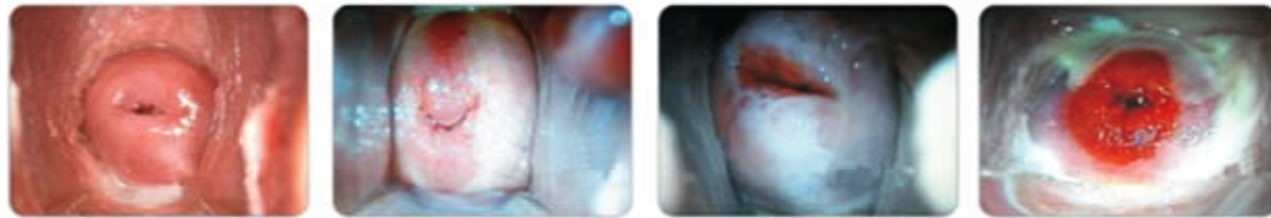

Normal Serviks

Doğum Sonrası Serviks

Servikal Erozyon I.

Servikal Erozyon II.




Servikal Erozyon III.

Servikal Polip

SeaMed

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| HD Kamera    | Görüntü Sensörü      | 1/2.8" SONY CCD   |
|              | Etkin Pikseller      | 3.27 Milyon civarı  |
|              | Görüntü Boyutu       | 1920x1080   |
|              | Sinyal Gürültü Oranı | 50db'den fazla  |
|              | Video Çıkışı         | HD-SDI  |
|              | Odaklama             | Otomatik/Manuel   |
|              | Beyaz Balans Ayarı   | Otomatik/Manuel   |
| Opsiyon      | Dahili Enerji        | Lityum Batarya ile 4 saat kullanım  |
|              |                      | 2.5" LCD Ekran  |
|              |                      | Kablosuz Video Gönderimi, Parazitsiz İletişim, Kablosuz Aktarım Mesafesi 30 Metre |
| Işık Kaynağı |                      | Barkod Okuyucu  |
|              |                      | LED Aydınlatma ile 1200 Lux   |

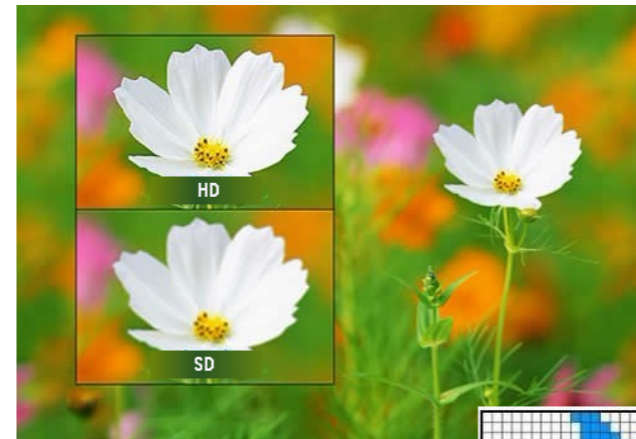

MÜKEMMEL HD GÖRÜNTÜ



HD Görüntü 1920x1080



1/2.8" SONY HD camera




Full HD 1080p



3.27mega HD pixels



HD-SDI Video çıkışı

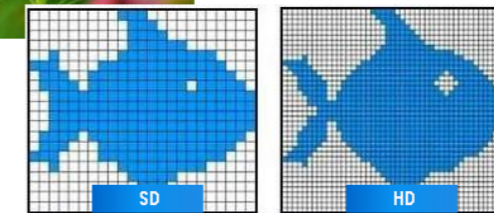

SD

HD

YÜKSEK KALİTEDE  
HD ÇÖZÜNÜRLÜK

  
DENİZLER  
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.  
Seven Tower No:1 Kat:3  
Ataşehir / İSTANBUL  
T : +90 216 577 52 22  
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com  
www.denizlermedikal.com